

# CEF TRÉSOR D'ESPAGNE



## Produit

**Modèle :** Correcteur d'Etat Fonctionnel (CEF) Trésor d'Espagne

On trouve aussi ce correcteur sous le nom de Plaque de Koltsov "Trésor d'Espagne" ou "FSC Treasure of Spain".

**Série :** Elite

**GTIN :** 3760296770014

## Description



Le CEF "Trésor d'Espagne" possède les propriétés suivantes :

- Contribue à la prévention et à la correction des maladies de l'appareil locomoteur de nature diverse, notamment inflammatoire (arthralgie, arthrites, arthroses, goutte, coxarthrose, épicondylite, etc.), en cas de dégénérescence du cartilage articulaire (ostéochondrite), de maladies dégénératives liées à l'âge (ostéoporose)
- Recommandé en cas de maladies cardiovasculaires, il contribue à soulager la douleur, à faire baisser la pression artérielle, à réguler le rythme cardiaque
- Stimule le rétablissement de l'état fonctionnel des organes respiratoires pour un large spectre de maladies des voies respiratoires supérieures, des bronches et des poumons
- Constitue une part importante du programme de réhabilitation complexe après des maladies des organes ORL d'origine différente : inflammatoire, bactérienne, virale (y compris après une pneumonie, en cas d'infection respiratoire virale aiguë, de COVID-19, etc.)
- Aide à éliminer l'œdème des muqueuses, à soulager en douceur les spasmes des bronches et des bronchioles en cas d'asthme bronchique, en période de rémission et d'exacerbation de la maladie

- Favorise la prévention et la correction des maladies inflammatoires, infectieuses et virales des organes génitaux, y compris en présence de pathologies non spécifiées associées à une baisse de l'immunité, à un manque d'hygiène personnelle, à un trouble du pH résultant de procédures gynécologiques, etc.
- Contribue à la prévention et à la correction d'un large spectre de maladies urologiques du système urinaire masculin et féminin (rein, uretère, vessie, urètre), notamment en cas d'hypothermie, de sédentarité, de troubles de la circulation sanguine dans les organes pelviens, de stase lymphatique
- Aide à rétablir l'équilibre acido-basique et l'équilibre eau-sel, à éliminer les œdèmes, quelle que soit la pathologie
- Contribue à éliminer le stress, la dépression, l'insomnie, efficace en cas d'épuisement nerveux
- Destiné à la correction des maladies de la peau : dermatites, eczéma, psoriasis, neurodermatite, acné, plaies, coupures (y compris à composante inflammatoire)
- Aide à renforcer les os, les dents et les ongles
- Favorise la régénération, le renouvellement et le rajeunissement de la peau en rétablissant l'apport sanguin dans les différentes couches de la peau (nombreuses utilisations possibles en cosmétologie et en chirurgie plastique)

## Indications



Le CEF de Koltsov "Trésor d'Espagne" est indiqué :

- En cas d'asthme bronchique, il est recommandé d'effectuer des inhalations avec de l'eau ou des préparations médicamenteuses structurées à l'aide du CEF en période de rémission et d'exacerbation de la maladie
- Il est indiqué de boire de l'eau structurée sur ce CEF, d'effectuer des recharges énergétiques, de prendre des bains, des douches, d'appliquer des compresses d'eau structurée
- Utiliser le CEF dans le cadre de programmes de traitement complets, ainsi que pour améliorer l'efficacité et accélérer la réadaptation physique après des opérations et des blessures, y compris en médecine sportive
- En cas d'exacerbation des maladies de l'appareil locomoteur, réduire temporairement la fréquence d'utilisation du correcteur en utilisant activement d'autres CEF prévus à cet effet
- Recommandé pour structurer les crèmes cosmétiques et thérapeutiques, les pommades, les différents produits hygiéniques appliqués localement et par voie externe, pour la pulvérisation, les douches vaginales
- S'en servir lors d'un SPA à domicile (bains de sel, applications de boue, masques et enveloppements cosmétiques, diffuseurs d'arômes, grottes de sel, etc.)
- Pour l'exercice des pratiques de remise en forme (techniques respiratoires, yoga, qi gong, wushu)

Compatible avec les CEF produits précédemment, en particulier avec les CEF : "Liberté de mouvement", "Bogourai", "Phénix", "Parascève», "n°3 Silhouette féminine", "Allié", "Neurovita", "Velikoretsky", "Trois Saints", "Source de Varvara", "Respiration légère (poumons saints)", "Extra ORL", "Allergo", "Diapason", "Facteur de Beauté", "n°19 Anti-tabac", "n°10 articulations saines", "n°5 Antidépandances" et "n°2 Détoxification".

Le temps de structuration de l'eau avec le CEF "Trésor d'Espagne" est d'environ 4h30.


## Composition



Le Correcteur d'Etat Fonctionnel contient la polarisation de l'eau de lagune rose sacrée de Salinas de Torrevieja (Espagne).

## Utilisation

Un CEF s'utilise très simplement. Vous pouvez utiliser une ou plusieurs des méthodes présentées ci-dessous. Pour maximiser son efficacité, il est recommandé de les utiliser toutes.

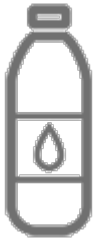

### 1) Structurer un liquide avec le CEF

Il suffit de poser un verre d'eau ou une bouteille d'eau sur le correcteur pendant quelques minutes pour structurer l'eau avant de la boire. Il fonctionne ainsi comme un "dessous de plat actif". Le temps de structuration varie selon la quantité d'eau à informer et le modèle de CEF. L'idéal est de boire 30 ml d'eau structurée par kg de masse corporelle. Ainsi, pour un individu de 70 kg, il faut boire idéalement 2,1 L/jour. A noter que tout liquide peut être structuré avec un CEF.

Si le liquide est en mouvement (par exemple dans un tuyau de douche), le temps de structuration est quasi instantané. Ainsi, si vous secouez simultanément la bouteille d'eau, accolée au CEF, le temps de structuration sera nettement raccourci.

Le contenant n'est pas important. Les ondes traversent quasiment tout.

Les temps de structuration sont variables selon les modèles de CEF.

**NB** : Attention les ondes électromagnétiques comme celles émises par les téléphones mobiles influencent aussi l'eau. Il est donc souhaitable d'éloigner vos mobiles lorsque vous structurez de l'eau avec vos CEF.



## 2) Porter le CEF sur soi

Si vous démarrez avec l'utilisation d'un CEF, il est préférable de boire de l'eau structurée quelques jours avant de porter le CEF sur vous. Porter le CEF sur vous pourra se faire progressivement : par ex, 2H le premier jour puis on ajoutera 1H pour jour pour les jours suivants. Cela habitue progressivement le corps aux vibrations du CEF et limite l'effet "crise de guérison".

Lorsqu'on porte le CEF sur soi, il est conseillé de le changer de place de temps à autre (par ex, plexus, poche gauche puis poche droite, etc.). On portera un ou plusieurs CEF de façon prolongée au niveau des organes malades ou sur les endroits douloureux. Plus généralement, il est conseillé de garder un CEF sur le plexus solaire.



## 3) Pratiquer des exercices énergétiques avec le CEF

L'Energie (Qi ou Prâna) est un principe vital invisible qui engendre un mouvement. Il faut qu'il circule librement, à travers le corps. Lorsque le flux de l'Energie est bloqué par un traumatisme physique ou émotionnel, surmenage, alimentation déséquilibré, mauvaise hygiène de vie, etc., alors des déséquilibres s'installent. Quand l'énergie est bloquée dans une partie du corps, les autres régions sont en déficit énergétique (souvent en aval du méridien). Cela se manifeste par un mal-être physique, mental ou émotionnel.

Le Rééquilibrage énergétique à l'aide de CEF aide à débloquer la stagnation d'Energie Vitale et harmoniser les centres d'énergie appelés chakras. Cependant, la façon dont le terrain énergétique est entretenu détermine la durée d'action de la bonne circulation. En effet, si c'est une mauvaise posture, un mouvement répété ou l'entretien d'un état émotionnel qui a engendré le blocage à l'origine, il est important pour l'individu d'en prendre conscience et de corriger ses comportements inadaptés qui l'ont mené à ce déséquilibre, pour éviter le "facteur d'entretien".

Il est conseillé de faire la séance d'un rééquilibrage énergétique régulièrement, à la même heure de préférence. Il est préférable de faire un rééquilibrage énergétique à l'aide de CEF de la même série.

Voici deux exemples de rééquilibrage :


**Rééquilibrage croisé** : Favorise le rétablissement du fonctionnement des systèmes cardio-vasculaire et lymphatique. Vous avez besoin de 2 CEF. Mettez un des deux correcteurs d'état fonctionnel sous le pied gauche. Le CEF doit être plus proche des orteils. Levez le deuxième CEF avec la main droite (tenir avec tous les doigts). Restez immobile pendant 1-3 minutes. Répétez cette manipulation avec position-miroir, c'est à dire : un CEF sous le pied droit et la main gauche levée avec un autre CEF. Restez immobile le même temps que la première fois. Si vous êtes restés 2 minutes pour la première position, vous devez rester 2 minutes également pour la deuxième position. Si vous ne pouvez pas rester debout, c'est possible de le faire en position allongée. Pour un meilleur contact du CEF avec le pied en position allongée, il est conseillé de mettre le CEF dans une chaussette.

**Rééquilibrage "Soleil"** : Vous avez besoin au minimum de 3 CEF. Positionnez les 3 CEF de la même série au sol en formant un triangle équilatéral. Restez assis dans le centre de ce triangle, soit directement au sol ou bien sur une chaise, en calmant vos pensées (15 minutes pour la série Bleue, 10 minutes pour la série Mauve, 3-5 minutes pour la série Or). Vous pouvez augmenter la puissance de cet équilibre énergétique en utilisant le quatrième CEF de la même série en le plaçant sous le coccyx.

Important: Cet équilibrage énergétique est à faire avant le coucher du soleil.

## Complément d'information

Chaque CEF protège également contre les effets nuisibles des champs électromagnétiques.

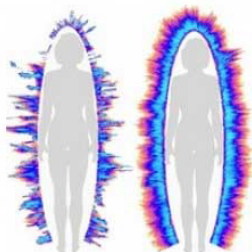



### Comment ça marche ?

Le scientifique russe Serguei Kottsov a créé un appareil capable de lire et d'enregistrer le spectre unique des vibrations électromagnétiques de n'importe quel objet ou forme de vie : plantes, cristaux, sources aux vertus curatives, préparations ayurvédiques, champs de vortex, lieux de force, canaux cosmoénergétiques et canaux énergétiques Maya. Il a combiné ensuite le résultat des recherches de Nicolas Tesla et du Pr. Nikolaev, notamment, pour mettre au point un dispositif capable de restituer les ondes capturées par ce premier appareil. Ainsi est né le CEF.

Le CEF ou Correcteur d'Etat Fonctionnel a été breveté par son fabricant "Region Centre". Il est constitué de plusieurs plaques de résine ferromagnétique produisant un champ d'ondes scalaires, protégées par une coque plastique d'environ 9 cm sur 6 cm. Son rayonnement est très faible et sans danger pour la santé. Ce dispositif est alimenté par l'énergie du champ magnétique de la Terre, c'est pourquoi il a une durée de vie théoriquement illimitée et n'a pas besoin de pile pour fonctionner.

Les effets sont volontairement lents pour ne pas perturber l'équilibre du corps. En général, les changements se ressentent après 3 ou 4 semaines. Il faut parfois attendre jusqu'à 2 ou 3 mois si les dérangements étaient déjà qualifiés de chroniques.

L'institut indépendant Allemand [Life-Test](#) évalue occasionnellement de nouveaux modèles de CEF. Les tests sont réalisés avec différents appareils : Analyse microscopique des champs sombres, cristallisation du sang, EEG ou électroencéphalogramme (mesures des ondes cérébrales), photographie directe haute fréquence, mesure de l'énergie du méridien, analyse biophotonique, analyse des données de biofeedback, photographie Kirlian par caméra EPC/GDV du professeur Korotkov et mesures de résistance cutanée (Biopulsar-Reflexograph).

Les CEF complètent parfaitement un traitement en médecine conventionnelle. Ces dispositifs sont certifiés et enregistrés par le Ministère de la Santé de Russie. Régulièrement des conférences scientifiques et pratiques se tiennent à Moscou où des médecins russes, utilisant les CEF, apportent des retours d'expérience.

A noter que les CEF ne sont pas reconnus comme dispositifs médicaux par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament en France et ne le seront probablement jamais.

*Ces informations sont extraites du site officiel français du fabricant, de sites de distributeurs anglais-russe et de newsletters anglaises traitant des CEF et synthétisant des séminaires d'information sur le sujet.*